


MAXXUS MASSZÁZSSZÉK MX 10.0Z

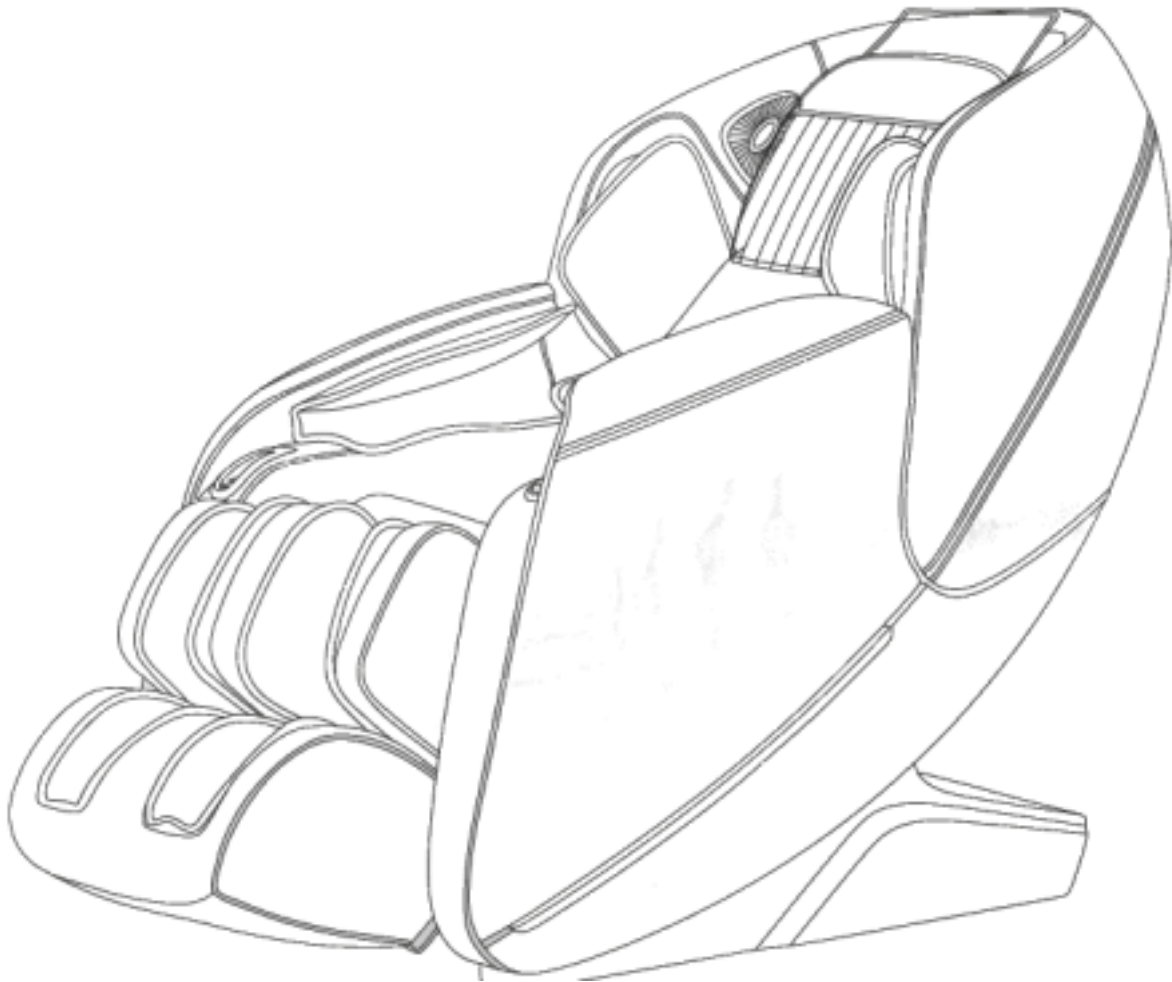

Biztonsági utasítások

A masszázsfotel használata előtt olvassa el a teljes használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat, a karbantartási és tisztítási utasításokat, valamint a használati utasítást. Győződjön meg arról, hogy mindenki, aki ezt a masszázsfotelt használja, ismerje ezt az információt.

Ügyeljen arra, hogy pontosan kövesse az ebben a kézikönyvben található karbantartási és biztonsági utasításokat.

Ezt a masszázsfotelt csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni. A rendeltetéstől eltérő használat balesetveszélyt, egészségkárosodást vagy a masszázsfotel károsodását okozhatja, amelyért a forgalmazó nem vállal fel.

Csatlakozás az elektromos hálózathoz

- A készülék működéséhez 220-230 V hálózati feszültség szükséges.
- A masszázsfotel csak földelt, 16 A-es biztosítókkal külön védett aljzatba szabad csatlakoztatni, és szakemberrel szerelheti fel a szállított hálózati kábel segítségével.
- Ha meg akarja változtatni a masszázsfotel helyzetét, először mindig húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- Tisztítás, karbantartás vagy egyéb munka előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- Amikor a hálózati csatlakozót az aljzathoz csatlakoztatja, ne használjon aljzat léceket vagy kábel tekercseket.
- Ha hosszabbítót használ, győződjön meg arról, hogy az megfelel az irányelveknek és előírásoknak.
- A tápkábelt mindig úgy fektesse le, hogy ne sérüljön meg vagy ne botoljon meg benne.
- Az elektromos készülékek, például okostelefonok, személyi számítógépek, televíziók (LCD, plazma, csöves stb.), játékkonzolok stb. működés közben és készenléti üzemmódban elektromágneses sugárzást bocsátanak ki. Tartsa távol ezeket az eszközöket a masszázsfoteltől, mert meghibásodást vagy interferenciát okozhatnak.
- Biztonsági okokból mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból, ha a készüléket nem használja.

További utasítások

- Válasszon sík, tiszta és könnyen hozzáférhető felületet. Biztosítson optimális szabad helyet és maximális biztonságot a masszázsfotel minden oldalán.
- Használat közben gondoskodjon jó szellőzésről és optimális oxigén ellátásról.
- A masszázsfotel kültéri használatra nem alkalmas, ezért tárolása és használata csak mérsékelt, száraz és tiszta helyen lehetséges.
- A működési és tárolási hőmérséklet-tartománynak legalább 10°C és maximum 30°C között kell lennie.
- A masszázsfotel használata és tárolása nedves helyeken, például úszómedencékben, szaunákban, fürdőszobákban stb. nem lehetséges.
- Ügyeljen arra, hogy a masszírozót mindig szilárd, sima és tiszta felületre helyezze működés közben és használaton kívül. Az egyenetlen felületet el kell távolítani vagy ki kell egyenlíteni.
- Az érzékeny padlók, például fa, laminált padló, csempe stb., például karcolásoktól való megvédésére javasolt tartósan védőszőnyeget helyezni a készülék alá. Győződjön meg arról, hogy a szőnyeg

csúszás ellen biztosított.


- Ne helyezze a masszázsfotel közvetlenül világos vagy fehér szőnyegre vagy szőnyegre, mert a készülék lábai megdörzsölhetik azokat.
- Ügyeljen arra, hogy a masszázsfotel, beleértve a hálózati kábelt is, ne érintkezzen forró tárgyakkal, és megfelelő biztonsági távolságot tartson minden hőforrástól, például fűtőtestektől, kályháktól, kandallóktól stb.

Biztonsági utasítások

- Ha a masszázsfotel nem használja, húzza ki a tápkábelt, hogy megakadályozza harmadik felek, például gyermekek, nem megfelelő vagy ellenőrizetlen használatát.
- A masszázsfotel első használata előtt konzultáljon orvosával.
- Az alábbi egészségügyi problémákkal/diagnózissal rendelkező személyeknek a masszázsfotel használatát előzetesen kezelőorvosukkal egyeztetniük és pontosítaniuk kell: csontritkulás, szívbetegség, pacemaker, láz, terhesség, nyílt sebek, csonttörések, zúzódások és ficamok, bőrbetegségek, hát- és gerincproblémák.
- A fent felsorolt betegségek vagy diagnózisok esetén az első használat előtt konzultáljon orvosával.
- A masszázsfotel olyan személyek általi használatát, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismeretekkel a masszázsfotel használatával kapcsolatban, mindig tapasztalt, a biztonságért felelős személy felügyelete mellett végezzék. a felhasználótól.
- Fizikai kényelmetlenség, fájdalom és/vagy légzési problémák esetén azonnal hagyja abba a masszázst.
- A masszázst mindig alacsony terheléssel kezdje, és használat közben fokozatosan növelje.
- Egy felhasználó legfeljebb naponta egyszer és legfeljebb 20 percig használja a masszázsfotel.
- A masszázsfotelét étkezés után legkorábban 1 órával használja.
- Ne aludjon a masszázs alatt.
- Ügyeljen arra, hogy a masszázs során megfelelő ruházatot viseljen.
- A masszázsfotel csak akkor használható, ha a felhasználó teste száraz. A széket nem szabad közvetlenül zuhanyozás/fürdés után használni.
- Ne használjon semmilyen tartozékot a masszázsfotel használata közben.
- Ezt a masszázsfotelét egyszerre csak egy személy használhatja.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a masszázsfotel és a

- tápkábel megfelelő-e
tökéletes állapotban. Soha ne használja a masszázsfotelt, ha bármilyen hiba vagy hiba van rajta vagy a tápkábelen.
- Ne használja a masszázsfotelt, ha a huzata vagy a műbőr sérült.
 - Csak eredeti pótalkatrészek használhatók.
 - A masszázsfotelt minden használat után meg kell tisztítani. Különösen távolítsa el minden szennyeződést, amelyet a test izzadsága vagy más folyadékok okoztak.
 - Mindig ügyeljen arra, hogy folyadékok (italok, izzadság stb.) semmilyen körülmények között ne kerüljenek a masszázsfotelbe, mert ez korrózióhoz, valamint a mechanikai és elektronikus alkatrészek károsodásához vezethet.
 - Ez a masszázsfotel gyermekek számára nem alkalmas.
 - Használat közben harmadik személyeknek – különösen gyerekeknek és állatoknak – kellő távolságot kell tartaniuk.
 - Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e tárgyak a masszázsfotel alatt, és minden esetben távolítsa el őket.
 - Mindig ügyeljen arra, hogy a masszázsfotelt ne használják a gyerekek játékként vagy mászókaként.
 - Soha ne végezzen szerkezeti változtatásokat a masszázsfotelben. Ez azonnal érvényteleníti a garanciális és a jótállás utáni igényeket.
 - Ennek a masszázsfotelnek a kialakítása a legújabb műszaki és biztonsági szabványokon alapul. Ezt a masszázsfotelt csak felnőttek használhatják! Az extrém, helytelen és/vagy nem tervezett használat egészségkárosodáshoz vezethet!


Amikor a lábtámasz fel van emelve, senki ne nyomja rá, hogy elkerülje a masszázsfotel előre esését, a masszázsfotel vagy annak részei sérülését, illetve személyi sérülést.

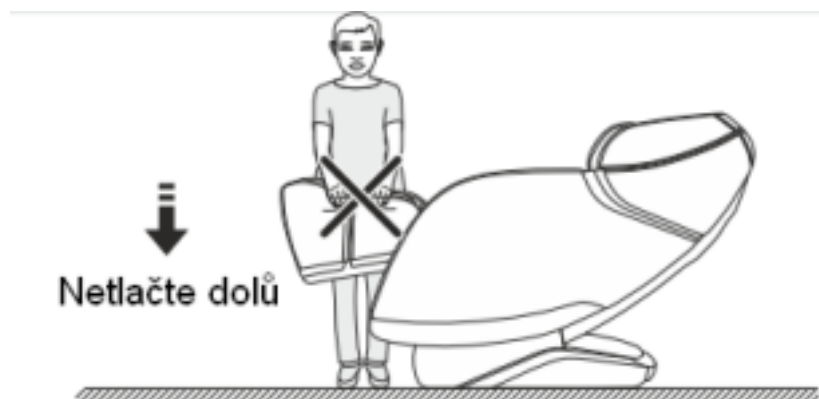

Mielőtt a masszázsfotelbe ül, győződjön meg arról, hogy az ülés megfelelően van elhelyezve a székben. Ha az ülés nincs megfelelően elhelyezve, az fenékfájdalmat és sérülést okozhat




Soha ne húzza ki a hálózati kábelt vagy a vezérlőegység kábelét, amíg a masszázsfotel be van kapcsolva vagy készenléti üzemmódban van. Ez károsíthatja a masszázsfotelét vagy áramütést okozhat. Mindig kapcsolja ki a masszázsfotelét a főkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt, esetleg a vezérlőegység kábelét. Ha a masszázsfotelét nem használja, mindig húzza ki a tápkábelt, hogy megakadályozza harmadik felek, például gyermekek illetéktelen

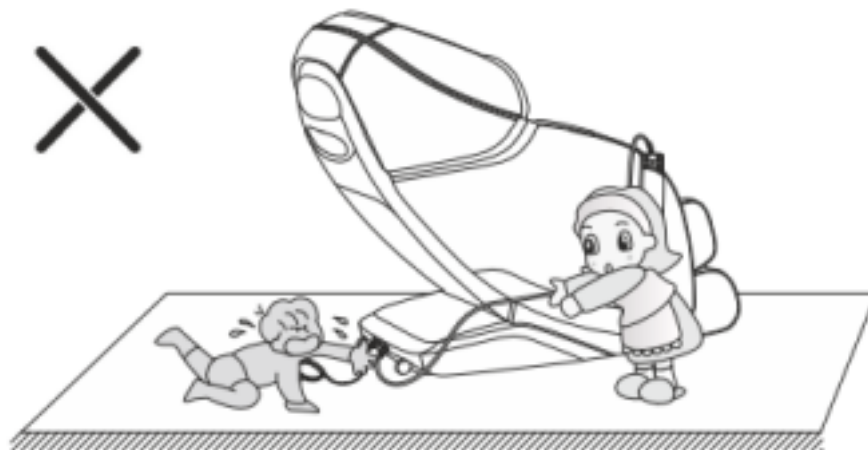



használatát.

A masszázsfotel használata előtt mindig ellenőrizze, hogy nincsenek alatta gyermekek, háziállatok vagy tárgyak, különösen a lábtartó vagy a háttámla környékén. Használat előtt el kell távolítani őket, mert károsíthatják a készüléket és sérülést okozhatnak.

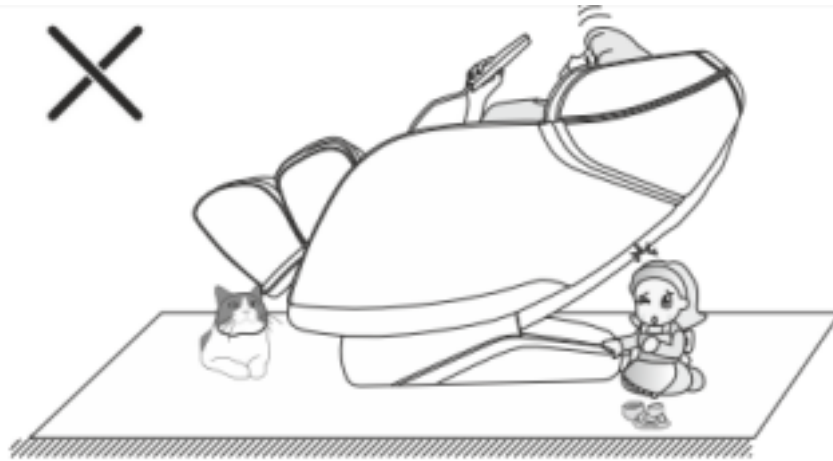

Áttekintés - Masszázsszék

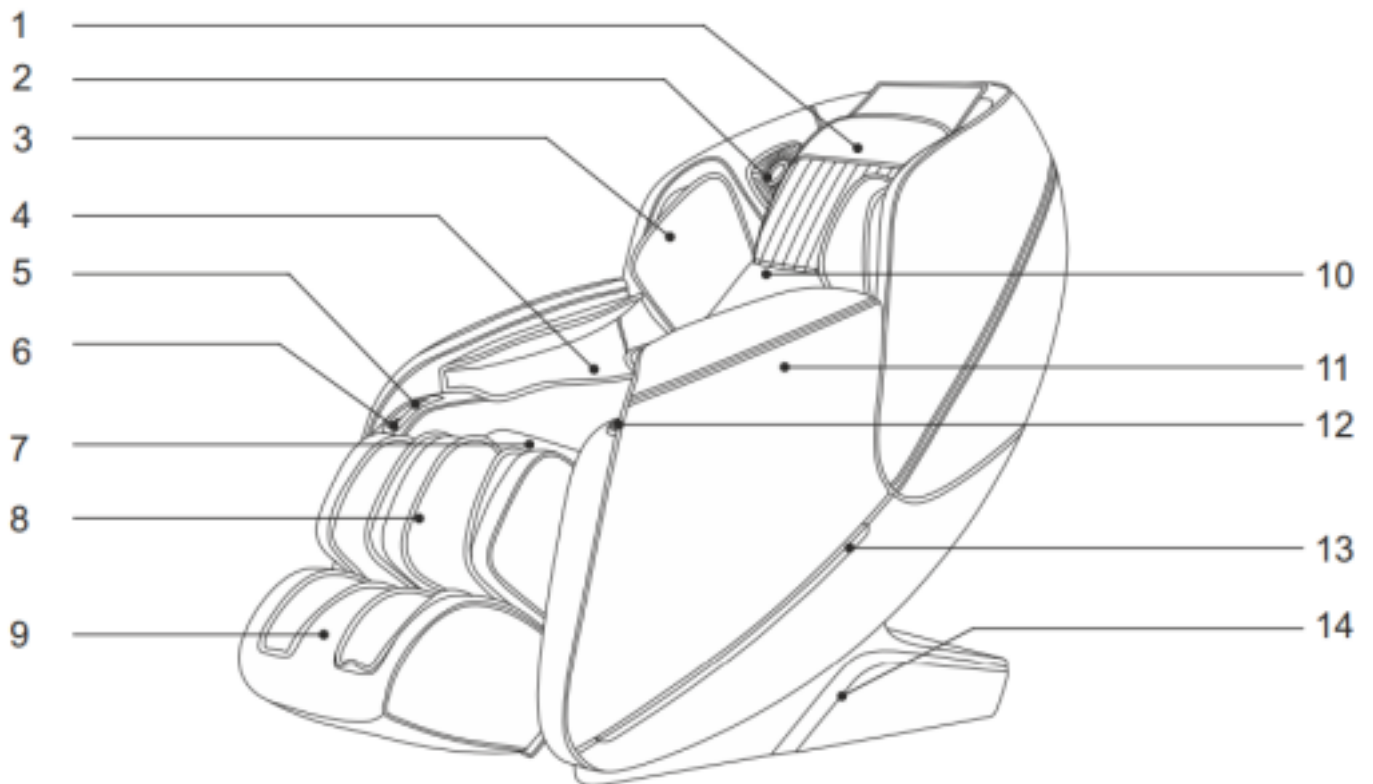

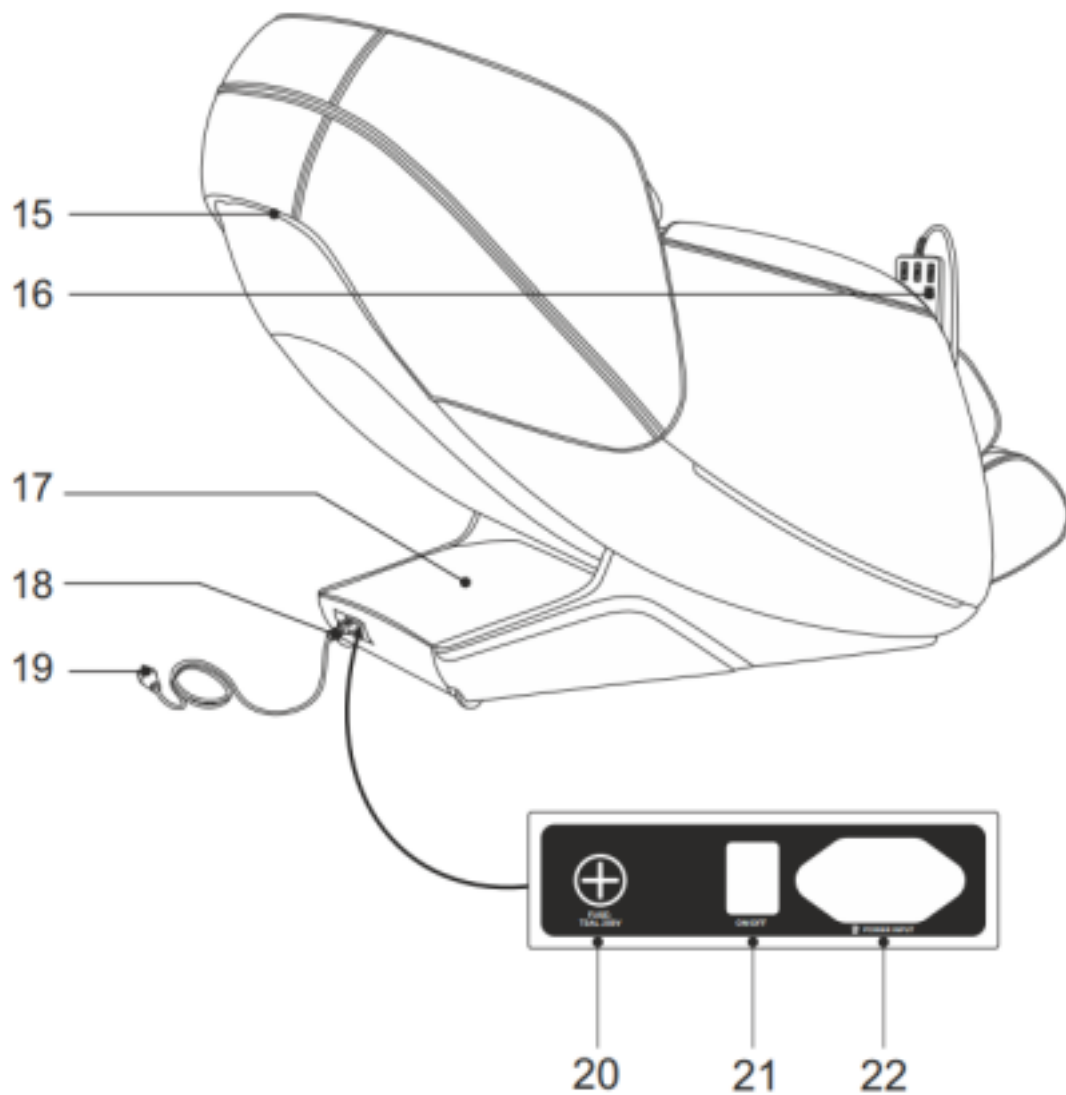


1. párna
2. digitális 3D hangszóró
3. váll/felkar légzsák 4. alkar légzsák
5. távirányító tartó
6. USB csatlakozás
7. ülőpárna
8. vádli légzsák
9. lábegység
10. hátpárna
11. karfa
12. vezérlőegység/közvetlen kiválasztó gombok
13. integrált világítás
14. oldalborító
15. hátoldal

16. távirányító
17. főborító
18. szállítókerekek


- 19. hálózati kábel
- 20. biztosíték
- 21. tápkapcsoló
- 22. aljzat a hálózati kábel csatlakoztatásához

Áttekintés- Távirányító

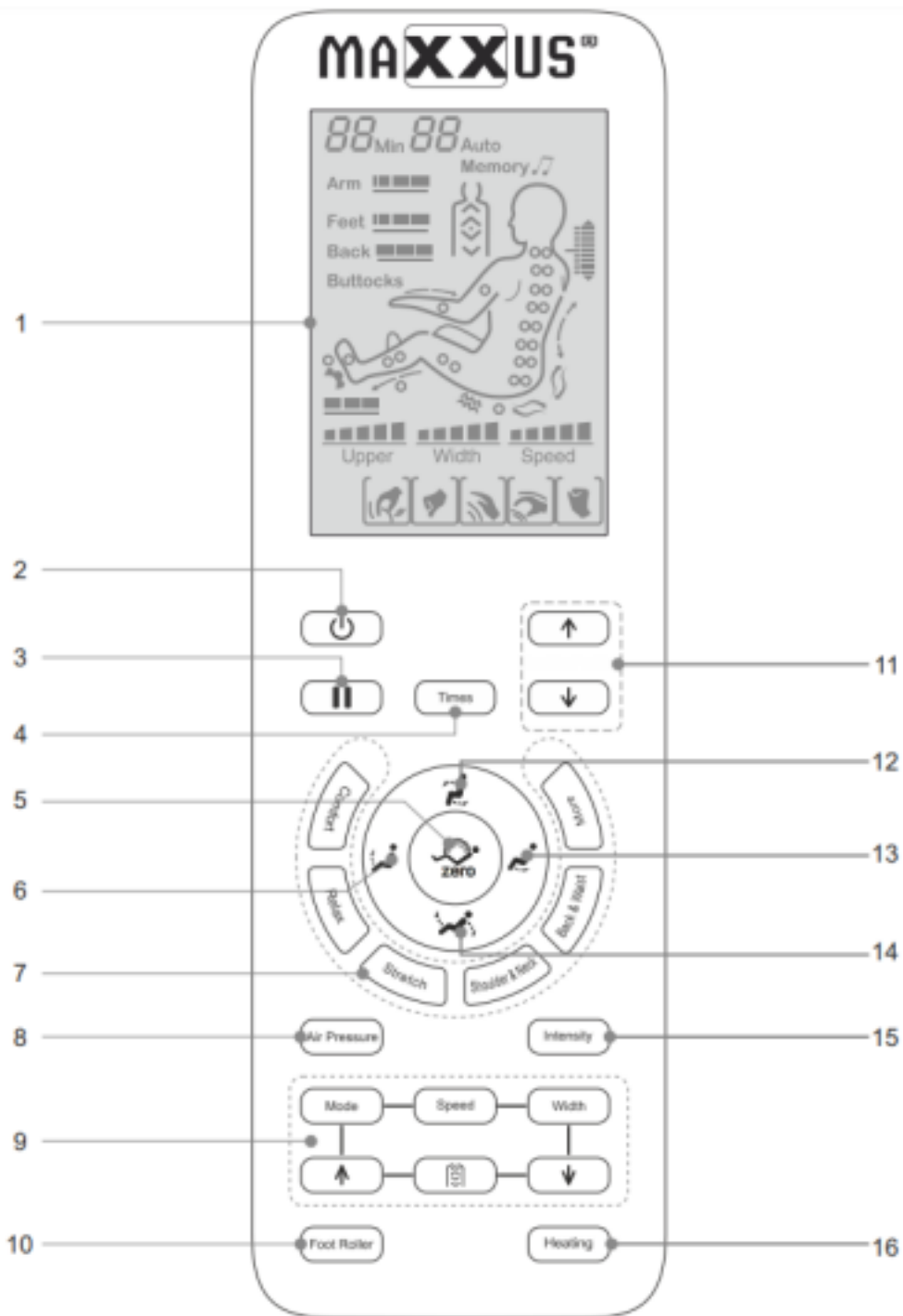

1. LCD kijelző
2. be-/kikapcsoló gomb
Be- vagy kikapcsolja a masszázsfotelt.
3. szünet gomb
Leállítja vagy elindítja az összes masszázs funkciót.
4. időbeállító gomb
5. gomb az összecukási helyzet beállításához
Három automatikus fekvő pozíció közül választhat.
6. gomb a láb blokk emeléséhez
7. gomb a masszázsprogramok kiválasztásához
8. gomb a légnyomás üzemmód beállításához (légzsák)
9. gomb a kézi masszázs módok kiválasztásához Gomb öt különböző kézi masszázs mód kiválasztásához:
 - Shiatsu
 - dagasztó masszázs
 - könnyű ütögetős masszázs
 - ütögetős masszázs
 - kombinált dagasztó és ütögető masszázs
10. talpmasszázs gomb
11. gombok a nyakmasszázs beállításához
Nyomja meg ezt a gombot a maximális nyakmasszázs magasság beállításához (↑ = magasabb, ↓ = alacsonyabb)
12. gomb a fekvő helyzet beállításához I
Ennek a gombnak a megnyomása megemeli a háttámlát és leengedi a lábtámaszt.
13. gombot a láb blokk elindításához
14. gomb a fekvő helyzet beállításához II
Nyomja meg ezt a gombot a háttámla leengedéséhez és a lábtámasz felemeléséhez.
15. gomb a légnyomás intenzitásának szabályozására
16. infravörös fűtés gomb
Be- vagy kikapcsolja a hátsó infravörös fűtést.

Csatlakozás az elektromos hálózathoz

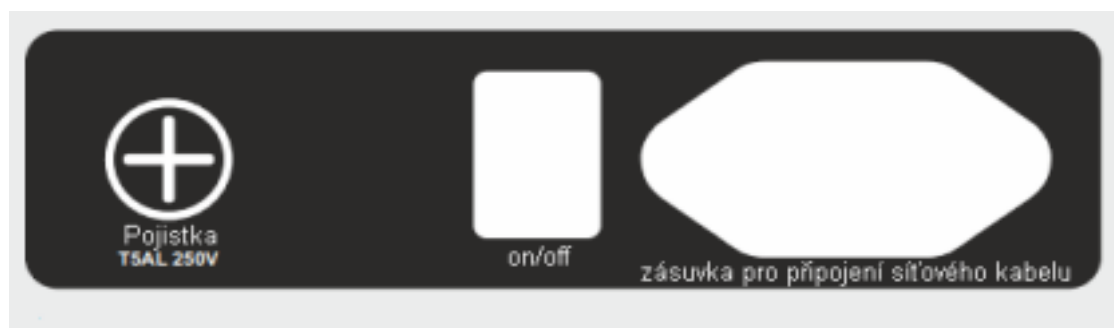

Csatlakoztassa a hálózati kábelt a masszázsfotel csatlakozóaljzatához.



Ezután csatlakoztassa a tápkábel hálózati csatlakozóját a hálózati aljzathoz.

FIGYELEM: A masszázsfotelt csak földelt, külön biztosítékkal ellátott 16 A-es megszakítóhoz szabad csatlakoztatni, és szakemberrel szerelni a szállított hálózati kábel segítségével.

A masszázs indítása

- Kapcsolja be a masszázsfotelt a főkapcsolóval. A főkapcsoló közvetlenül a hálózati kábel csatlakoztatására szolgáló aljzat mellett található (lásd a fenti képet).
- Nyomja meg a be/ki gombot a távirányítón.
- A szék most automatikusan dönthető helyzetbe áll (a háttámla leereszkedik, a lábtámasz pedig felemelkedik.) Ha 3 percen belül nem történik választás program, a masszázsfotel automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, és az ülés helyzet visszaáll a kiinduló helyzetbe.
- A program kiválasztása után a masszázsfotel automatikusan elindítja a testszkennelést. A masszázsfotel meghatározza a test alakját és az optimális váll/nyak magasságot a masszázsához, valamint az akupresszúrás pontokat.
- Ha a masszázsfotel által meghatározott váll/nyak magassága eltér az Ön tényleges váll/nyak magasságától, a „↑” és „↓” gombok megnyomásával módosíthatja a beállítást. Tíz különböző magasság állítási fokozat létezik. Ha a beállítás 10 másodpercen belül nem változtat, a szék a közben meghatározott pozíciót fogja használni testszkennelés közben.
- A test vizsgálat során a váll/nyak beállítási szimbóluma megjelenik a kijelzőn, és hangjelzés hallható. A test vizsgálat azonnal ki is hagyhatja annak megkezdése után. Ehhez lépjen közvetlenül az előző lépésre.
- Nyomja meg a megfelelő program gombot a 12 előre beállított

masszázsprogram egyikének kiválasztásához, és indítsa el a masszázst.

Maszázs programok

<u>Gomb</u>	<u>Leírás</u>	<u>Kijelző</u>
Comfort	Teljes testmasszázs az izmok ellazítására..	F1 Auto
Relax	Mélymasszázs a legfontosabb akupresszúrás pontok ellazulnak és csökkentik az izomfájdalmat.	F2 Auto

Stretch	A háttámla és a lábégység rendszeresen le- és felemelkedik e tevékenység során. Intenzív nyomásos masszázis, nyújtás és láb húzás. Ez a masszázis csökkenti a fáradtságot és helyreállítja a vitalitást.	F3 Auto
Shoulder&neck	Ez a masszázis a vállra és a nyakra összpontosít.	F4 Auto
Back&waist	Ez a masszázis a hát és a derék területére összpontosít.	F5 Auto
Tenger	Teljes testmasszázs - mélymasszázs a testfiatalításért.	A1 Auto
Tenger	Kiropraktikus masszázis - a test és a lélek relaxációja..	A2 Auto

Tenger	Ez a masszázis az izomfáradtság jeleinek csökkentésére és megszüntetésére összpontosít. A hát és a végtagok ellazítására szolgál, valamint optimalizálja a mikrokeringést.	A3 Auto
Tenger	Meridián masszázis: Ebben a masszázisban a bőrünk alatt található 12 fő meridián megnyomásával és gyengéd simogatásával állítjuk helyre az életenergiát. A megkeményedett szövetek gyengéden fellazulnak, az immunrendszer megerősödik, és elősegíti az egyensúlyt központi idegrendszer.	A4 Auto
Tenger	Intenzív masszázis a fenék területén. Ellazítja az izmokat és elősegíti a zsírcsökkentést.	A5 Auto

Tenger	Alvásmasszázis – a test tizenkét legfontosabb akupunktúrás pontjának masszírozásával támogatja a testet a felépülési fázisban. Ő tud hosszú távon javítja az alvás minőségét.	A6 Auto
Tenger	Nyomásos masszázis az egész testre összpontosítva. Mélymasszázis a test teljes ellazulásához. Enyhíti az izomfájdalmat és a fáradtságot.	A7 Auto

Manuális masszázis

Funkció	Gomb	Masszázis típus	Kijelző	Beállítási opció(k).
Manuális masszázis	Mode	Shiatsu		Sebesség és hatótávolság
Manuális masszázis	Mode	Gyúró masszázis		Sebesség
Manuális masszázis	Mode	Gyengéd ütögető masszázis		Hatótávolság

Manuális masszáz	Mode	Kombináció: dagasztás és gyengéd ütögető	Sebesség
Manuális masszáz	Mode	Ütőmasszázs	Sebesség és hatótávolság
<u>Beállítási lehetőségek</u>			
Sebesség	Speed		5-ben állítható fokon
Hatótávolság	Width		3-ben állítható fokon

Manuális masszázspozíció

A gombok megnyomásával különböző típusú kézi masszázst választhat. A "SEBESSÉG" gomb megnyomásával szabályozhatja a masszáz

s sebességét Shiatsu, dagasztás, dagasztás és gyengéd ütögető és koppintó masszázs módok kombinációjában.




A "SZÉLESSÉG" gombbal beállíthatja a masszáz

s tartományát (módosíthatja a masszázs görgők közötti távolságot) a Shiatsu masszázs, a dagasztó masszázs, a gyengéd ütögetős masszázs és a ütögetős masszázs fajtáihoz.


<u>Fukció</u>	<u>Gomb</u>	<u>Leírás</u>	<u>Kijelző</u>	<u>Lehetőségek) <u>Beállítások</u></u>
Pozíció kézikönyv masszázsok		Fixpontos masszázs		Igen
Pozíció kézikönyv masszázsok		A test egy részének részleges masszázsa		Igen
Pozíció kézikönyv masszázsok		Teljes felsőtest masszázs.		Nem

<u>Beállítási lehetőségek</u>				
Masszázs fent				Felfelé mozgatja a masszázst.
Masszázs fent				Lelfelé mozgatja a masszázst.

Légnyomásos masszázs (légzások)


<u>Fukció</u>	<u>Gomb</u>	<u>Leírás</u>	<u>Kijelző</u>	<u>Lehetőségek Beállítások</u>
Légnyomásos masszázs		Nyomásos masszázs kezek és lábak.		3 lépésben vagy kikapcsolva.
Légnyomásos masszázs		Nyomásos masszázs kar.		3 lépésben vagy kikapcsolva.
Légnyomásos masszázs		Nyomásos masszázs lábát.		3 lépésben vagy kikapcsolva.

A nyomásos masszázs intenzitásának beállítása

Intenzitás		Kapcsolja be vagy nyomás leállítás légmasszázsok és az intenzitás beállításait sűrített levegő masszázskok.		3 lépésben vagy kikapcsolva.
------------	---	---	--	------------------------------

Lábmasszázs


<u>Fukció</u>	<u>Gomb</u>	<u>Leírás</u>	<u>Kijelző Beállítás lehetőségek.</u>
----------------------	--------------------	----------------------	--

Lábmasszázs		Be/ki henger masszázsok láb és Beállítások intenzitás	3 fokban illetve kikapcsolva
-------------	---	---	---------------------------------

Infra fűtés a hátsó részen

<u>Fukció</u>	<u>Gomb</u>	<u>Leírás</u> <u>Kijelző</u>	<u>Megjegyzés</u>
Funkció fűtés		Be vagy kikapcsolva infravörös befűtés hátsó terület	Teljes termikus fűtés teljesítmény kb perctől a bekapcsolástól






Szünet funkció

<u>Fukció</u>	<u>Gomb</u>	<u>Leírás</u> <u>Kijelző</u>	<u>Megjegyzés</u>
Felfüggesztés művelet		Megáll vagy újból elindul aktuális masszázs	Az idő tovább fut szünet módban is


Nyomja meg a "Szünet" gombot a folyamatban lévő masszázs szüneteltetéséhez. A gomb megnyomása után minden masszázsfunkció automatikusan leáll. A masszázs folytatásához nyomja meg ismét a „Szünet” gombot.

A fekvő helyzet beállítása

<u>Fukció</u>	<u>Gomb</u>	<u>Leírás</u>

Emelő funkció		Ha megnyomja és lenyomva tartja ezt a gombot, a háttámla felemelkedik és a lábtámasz egyszerre süllyed. A maximális pozíció elérésekor hangjelzés hallható, és a háttámla mozgása felfelé és a lábtámasz lefelé mozgása leáll. A mozgás megállításához egy adott helyzetben nyomja meg újra ezt a gombot.
Csökkentő funkció		Ha lenyomva tartja ezt a gombot, a háttámla lesüllyed és a lábtámasz egyidejűleg felemelkedik. A maximális pozíció elérésekor hangjelzés hallható, és a lábtámasz felfelé és lefelé mozgása leáll. A mozgás megállításához egy adott helyzetben nyomja meg újra ezt a gombot.
A lábegység felemelése		Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot a lábegység felemeléséhez. A maximális pozíció elérésekor hangjelzés hallható, és a mozgás leáll. A mozgás megállításához egy bizonyos pozícióban nyomja meg újra ezt a gombot.
A lábegység leengedése		Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot a lábegység leengedéséhez. A legalacsonyabb pozíció elérésekor hangjelzés hallható, és a mozgás leáll. A mozgás megállításához egy adott helyzetben nyomja meg újra ezt a gombot.
Nulla gravitációs jellemző		A gomb megnyomásával három előre beállított fekvés választható ki.


Időzítő beállítása
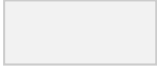
<u>Fukció</u>	<u>Gomb</u>	<u>Leírás</u>	<u>Kijelző</u>	<u>Megjegyzés</u>
Nastavení časů		Ennek a gombnak a megnyomásával meghosszabbíthatja a masszázs idejét 5 perccel maximum 30 percig		Ha az idő meghaladja a 30 percet akkor a kijelző visszatér az 5 perchez

A folyamatban lévő masszázst megszüntetése

- Ha szeretné befejezni az aktuális masszázst, nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a távirányítón. Mostantól minden masszázsfunkció automatikusan leáll, a háttámla a maximális helyzetbe kerül, a lábtámasz pedig leereszkedik.
- Ha az aktuális masszázs idő lejár, az összes masszázsfunkció is leáll. A háttámla és a lábtámasz helyzete azonban változatlan marad. Az eredeti helyzetbe való visszaállításhoz (háttámla fel/lábtámasz le) nyomja meg a gombot
- be/ki a távirányítón.

Vezérlőegység és közvetlen kiválasztó gombok



1. Bekapcsológomb

A masszázsfotel be- vagy kikapcsolása.

2. A fekvő pozíció beállítására szolgáló gomb

Nyomja felfelé a gombot, és a háttámla lassan leereszkedik, miközben a lábegység felemelkedik. A kívánt pozíció elérése után engedje el a gombot. Nyomja le a gombot, és a háttámla lassan felemelkedik, miközben a lábegység leereszkedik. A kívánt pozíció elérése után engedje el a gombot.

3. A lábegység helyzetét beállító gomb

Nyomja felfelé a gombot, és a lábegység lassan felemelkedik. A kívánt pozíció elérése után engedje el a gombot. Nyomja le a gombot, és a lábegység lassan leereszkedik. A kívánt pozíció elérése után engedje el a gombot.

4. A masszázsprogramok kiválasztására és módosítására szolgáló gomb

5. Funkció nélküli gomb

6. Tárolórekesz

7. USB csatlakozás

USB töltőkábel (nem tartozék) csatlakoztatásának lehetősége telefonok, e-olvasók, táblagépek stb.

A masszázsfotel kikapcsolása

Az aktuális masszázs befejezése után kapcsolja ki a masszázsfootelt a főkapcsolóval. Biztonsági figyelmeztetések:

Annak elkerülése érdekében, hogy harmadik személyek (például gyermekek) felügyelet nélkül használják a masszázsfootelt, húzza ki a tápkábelt úgy, hogy először húzza ki a kábel csatlakozóját a konnektorból, majd húzza ki a kábelt a masszázsfootelből is. A tápkábelt a masszázsfooteltől elkülönítve tárolja.

Bluetooth audio és hangszóró funkció

Ez a masszázsfootel Bluetooth 4.0 vevővel van felszerelve. Kapcsolja be a masszázsfootelt, majd keressen új Bluetooth-eszközöket okos telefonján vagy táblagépen keresztül. Masszázsasztal az "IMCM-...." címkével jelenik meg. A zeneválasztás és a masszázsfootelbe épített hangszórók hangerejének beállítása kívülről, az Ön által használt okostelefonon vagy táblagépen keresztül történik.

Párna és hátpárna

A párnával szabályozhatja a nyak- és vállmasszázs intenzitását.

Eldöntheti, hogy használ-e párnát a feje alá (ajánlott), vagy sem. A háttámla cipzárral kapcsolódik a háttámlához (lásd 1. kép). A fej alatti párna és a hátoldali párna tépőzárral van rögzítve (lásd 2. kép).




Szállítás

A masszázsfotel egyszerű és biztonságos szállítása érdekében a padlóburkolat hátulján két robusztus szállítókerék található. A masszázsfotel szállításához álljon mögé, és két kézzel fogja meg a háttámla felső végét. Most emelje fel a masszázsfotel elejét úgy, hogy a háttámlát maga felé húzza, amíg a szállító kerekek hozzá nem érnek a padlóhoz. Most a szállító kerekek segítségével könnyedén mozgathatja a masszázsfotel a kívánt pozícióba.

Jegyzet:

A masszázsfotel nagy súlya miatt több ember emelése javasolt. Mindig ügyeljen arra, hogy a szék szilárd és biztonságos alappal rendelkezik, amikor emeli, szállítja és leteszi.

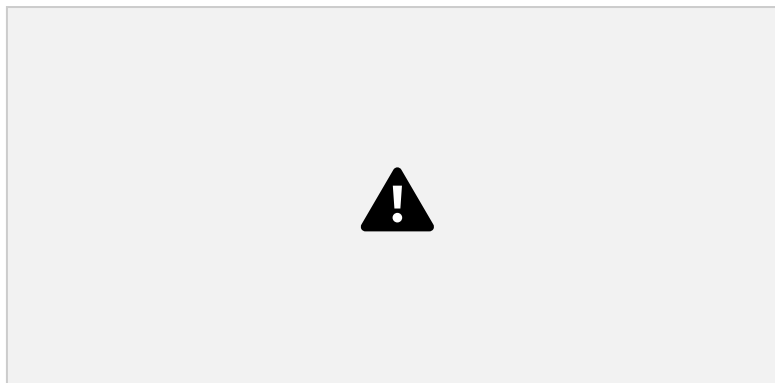


Jegyzet:

Egyenetlen felületeken vagy érzékeny padlóburkolatokon a masszázsfotel ne tolja, hanem legalább ketten vigye.

Padlóvédelem:


Mivel a széknek nagyon nagy a súlya, javasoljuk, hogy helyezzen alá padlóvédőt az érzékeny padlókhhoz, pl. parketta, laminált stb. Erre a célra használhat szőnyeget, de védőszőnyeget is.

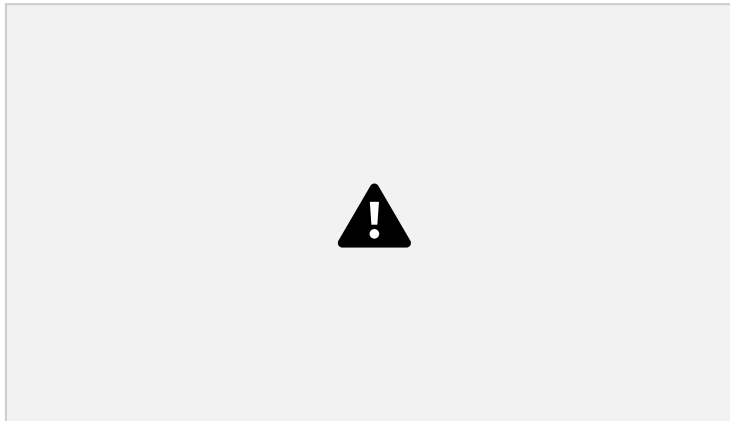

A lábtartó összeszerelése

1. lépés – 1. ábra: Csatlakoztassa a levegőtömlőt és a kábelköteget a lábtartó és az alapkeret közé. Tolja vissza a kiálló kábeleket a keretbe.

2. lépés – 2. ábra: Helyezzen egy rögzítőelemet a lábtartó keresztcsőjének jobb oldalára, egyet pedig bal oldalára.

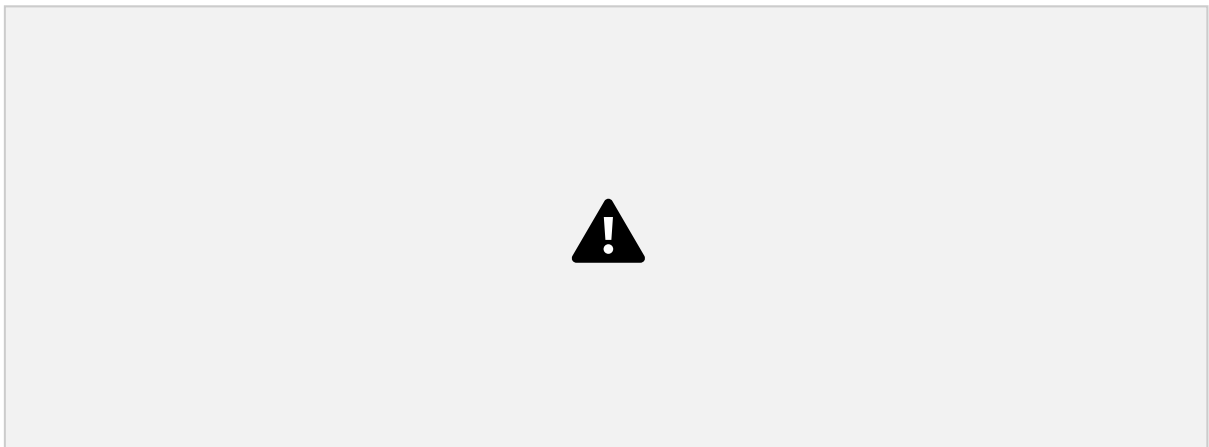

3. lépés – 3. ábra: Helyezze be a 2. lépésben rögzített rögzítőelemeket a masszázsfotel kampójába.

4. lépés – 4. ábra: Rögzítse mindkét rögzítőelemet 2-2 M4-es csavarral. Győződjön meg arról, hogy a levegőtömlő és a kábelköteg nincs becsípve vagy sérült.



Helyszín és tárolás

Ezt a masszázsfotelét kizárólag száraz, jól edzett beltéri használatra tervezték. Nedves vagy vizes helyeken, például szaunákban, úszómedencékben stb. és kültéri területeken, például erkélyeken való használat vagy tárolás. teraszok, kertek, garázsok stb. nem tartoznak ide. Ezeken a helyeken az ott általában uralkodó magas páratartalom és alacsony hőmérséklet miatt elektronikai hibák, korrózió léphet fel. Az ilyen jellegű sérülésekre nem vonatkozik a garancia. Válasszon száraz, vízszintes és jól temperált helyet a masszázsfotel állásához vagy tárolásához. Ezenkívül a széket ne tegye ki tartósan közvetlen napfénynek, mert ellenkező esetben elszíneződhet és megsérülhet. Saját érdekében gondoskodjon a terület megfelelő szellőztetéséről használat közben, hogy biztosítsa az optimális oxigénellátást. Mielőtt hosszabb használaton kívüli idő után ismét használná a masszázsfotelét, győződjön meg arról, hogy minden rögzítőelem szilárdan rögzítve van és rögzítve van.



Az álló helyzetben lévő háttámla és a mögötte lévő bútorok vagy falak közötti távolságnak legalább 275 mm-nek kell lennie, ellenkező esetben a masszázsfotel, a falak vagy a bútorok megsérülhetnek a háttámla leengedésekor.

Műszaki adatok:

Modell: Masszázsszék MX 10.0z

Névleges feszültség: 220-240 V

Frekvencia: ~ 50/60Hz

Névleges teljesítményfelvétel: 120 W

Zajszint: ≤ 55 dB

Biztonsági szint: 1. osztály

Felhasználási terület: Lakásterület - csak magánhasználatra

Ápolás, tisztítás és karbantartás

FIGYELEM: Tisztítás és/vagy javítás előtt a masszázsfotel teljesen le kell választani az elektromos hálózatról. Ez csak akkor érvényes, ha a hálózati kábel ki van húzva a konnektorból és a masszázsfotelből, ezért először húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, majd húzza ki a hálózati kábelt a masszázsfotelből. A hálózati kábelt csak az összes munka befejezése és a készülék tökéletes állapotba helyezése után szabad visszacsatlakoztatni a masszázsfotelhez és a hálózathoz. Ne végezzen korábbi javításokat szakemberrel való konzultáció nélkül.

Tisztítás: Rendszeresen tisztítsa meg a masszázsfotel. Használjon nedves ruhát és szappant. Soha ne használjon oldószereket. Rendszeresen porszívózza fel a széket nagyon alacsony szívóerővel és textilteltettség segítségével. Törölje le a távirányítót egy száraz ruhával -

ne használjon folyadékot. A rendszeres tisztítás jelentősen hozzájárul a masszázsfotel karbantartásához és élettartamához.

A testi izzadság vagy más folyadékok által okozott károokra a garancia semmi esetre sem vonatkozik. Ügyeljen arra, hogy a masszázs során ne kerüljön folyadék a masszázsfotelbe vagy a távirányítóba.

Havonta legalább egyszer ellenőrizze a rögzítőanyagot - ellenőrizze a csavarok meghúzását a lábtámasz és a masszázsfotel közötti csatlakozáson. Szükség esetén húzza meg őket újra.

Ártalmatlanítás

törvény szerinti felszámolásról szóló európai irányelv

elektromos és elektronikus eszközök: Semmilyen körülmények között ne dobja a készüléket a normál háztartási hulladék közé. A fogyasztókat törvény

kötelezi arra, hogy a régi berendezéseket a háztartási berendezésektől elkülönítve helyezték el

Pazarlás. A készüléket csak önkormányzati vagy felhatalmazott hulladékkezelő cégen keresztül ártalmatlanítsa. Ebben az esetben a régi készülék ártalmatlanítása ingyenes. Ez az egyetlen módja annak, hogy régi készülékét gondosan ártalmatlanítsa, hogy elkerülje a környezetre gyakorolt negatív hatásokat. Kérjük, tartsa be a jelenleg hatályos szabályzatot. Ha kétségei vannak, kérdezze meg a városi hivatalt vagy az önkormányzati hivatalt a helyes és környezetbarát ártalmatlanítási lehetőségekről.

Elemek / újratölthető elemek (ha vannak a készülékben): az Elem Rendelet értelmében Ön, mint végfelhasználó jogilag köteles az összes használt elemet és akkumulátort visszaküldeni. A normál háztartási szemétbe helyezését törvény tiltja. A legtöbb akkumulátoron már van egy szimbólum, amely emlékezteti Önt erre a szabályozásra. Ez a szimbólum általában az akkumulátorban található nehézfémeket jelzi. Ezek a nehézfémek környezetbarát ártalmatlanítást igényelnek, ezért a törvény minden fogyasztót köteles leadni az elemeket és akkumulátorokat a város megfelelő gyűjtőhelyére. Ezért minden fogyasztónak törvényi kötelezettsége van, hogy az elemeket és az újratölthető elemeket a városának megfelelő gyűjtőhelyére vagy a kereskedőnél leadja. Ha kétségei vannak, kérje városának vagy önkormányzatának megfelelő és környezetbarát ártalmatlanítását.

Robbantott nézet és alkatrészlista

Robbantott nézet és alkatrészlista



