HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Négykerekű járókeret üléssel és bevásárlótáskával



1. Az Ön biztonsága érdekében

1.1 Biztonsági előírások

- Olvassa el figyelmesen és teljes egészében ezt a dokumentumot.
- Tartsa be az útmutatóban és a terméken feltüntetett utasításokat és biztonsági figyelmeztetéseket.
- A terméket csak műszakilag kifogástalan állapotban, a biztonsági kockázatok figyelembevételével használja.
- Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatra, és a termék továbbadásakor adja át az új felhasználónak.

1.2 Rendeltetésszerű használat

A termék kizárólag magáncélú használatra készült.

- A terméket kizárólag járókeretként vagy átmenetileg ülőhelyként használja.
- Csak a gyártó által szállított eredeti alkatrészeket vagy az általa jóváhagyott pótalkatrészeket használjon.
- Javítást kizárólag szakképzett személy végezhet.

Minden ettől eltérő használat nem rendeltetésszerűnek minősül, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

A biztonsági előírások be nem tartásából eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

1.3 Nem rendeltetésszerű használat

A termék nem alkalmas kereskedelmi célú használatra.

- Ne használja játékként, mászásra vagy hasonló célokra.
- Ne lépje túl a maximális összterhelést.
- Ne akasszon nehéz tárgyakat a termékre.
- Ne használja a terméket hibás alkatrészekkel.
- Gyermekek nem végezhetik az összeszerelést, szétszerelést, karbantartást vagy tisztítást.
- A rollátor nem használható kerekesszék helyett.

1.4 Célcsoport

A terméket felnőttek, valamint 14 éves kortól serdülők felügyelet mellett használhatják.

Korlátozott fizikai vagy szellemi képességű személyek kizárólag felügyelet mellett használhatják.

A rollátor használatáról előzetesen konzultáljon orvosával.

Szakszemélyzetnek a mechanikai vagy egészségügyi képzettséggel rendelkező személyek minősülnek (például kézműves vagy fémipari szakemberek).

Figyelmeztető jelzések

FIGYELMEZTETÉS – Olyan veszély, amely az előírások figyelmen kívül hagyása esetén halált vagy súlyos sérülést okozhat.

VIGYÁZAT – Olyan veszély, amely sérülést okozhat.

FIGYELEM – Olyan veszély, amely anyagi kárt okozhat.

2. Leírás és működés

Ez a termék csökkent mozgásképességű személyek számára készült, járást segítő rollátor.

Átmenetileg ülőhelyként is használható.

A rollátor 13 literes, levehető bevásárlótáskával rendelkezik. Az állítható magasságú fogantyúk és a nagyméretű kerekek kényelmes közlekedést tesznek lehetővé.

Az alkatrészek megnevezése

1. Háttámla
2. Rögzítőfék
3. Ülőfelület
4. Állítható magasságú fogantyú
5. Bevásárlótáska
6. Fékkar
7. Kerék



3. Kicsomagolás és ellenőrzés


3.1 Kicsomagolás

FIGYELMEZTETÉS – A csomagolóanyag fulladásveszélyt jelent.

- A csomagolóanyagot haladéktalanul ártalmatlanítsa.
- Az apró alkatrészeket tartsa távol a gyermekektől.

Eljárás

1. Távolítsa el a ragasztószalagokat, vagy használjon ollót.
2. Állítsa a kartondobozt úgy, hogy a nyilak felfelé mutassanak.
3. Nyissa ki a dobozt.
4. Vegye ki az összes alkatrészt.
5. Helyezze az alkatrészeket puha, sík felületre.
6. Ellenőrizze a csomag tartalmának teljességét.

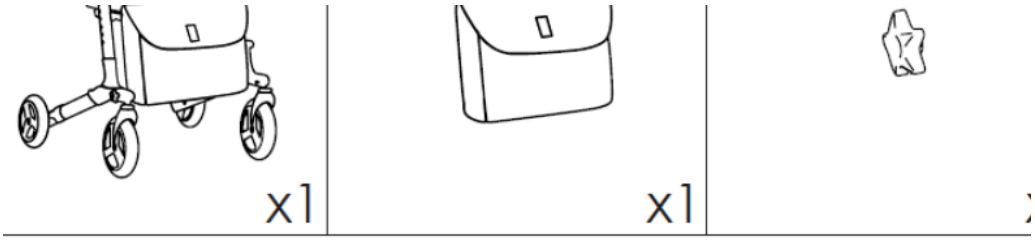

Kontrola dodávky

žívejte výrobek s chybějícími nebo vadnými díly.

3.2 A csomag ellenőrzése

Ne használja a terméket, ha valamely alkatrész hiányzik vagy sérült.

4. Összeszerelés

VIGYÁZAT – Sérülésveszély.

A terméket teljesen és biztonságosan szerelje össze.


4.1 Szétnyitás

Kövesse az összeszerelési útmutatót.


4.2 Összecsukás

Kövesse az összeszerelési útmutató lépéseit fordított sorrendben.

- Nyissa ki az ülőlapot, és mindkét kezével nyomja lefelé.

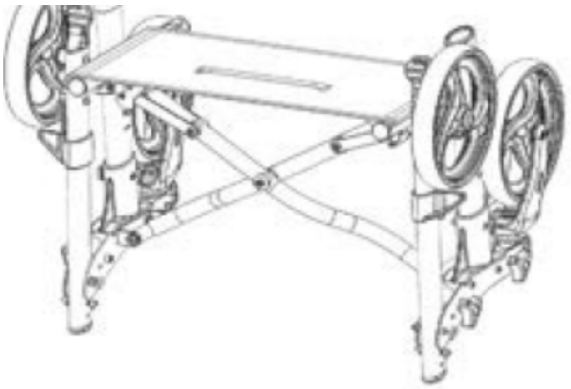

- Szerelje fel az első kereket. Teljesen húzza meg a csavart.

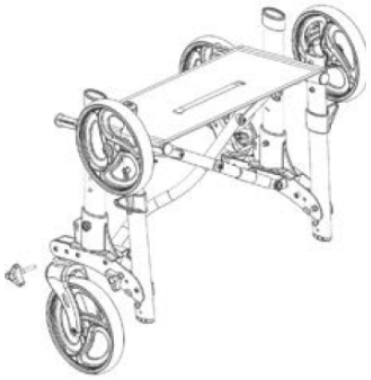

• Szerelje fel a hátsó kereket. Teljesen húzza meg a csavart.




nontujte rukojeti. Zasuňte tyče obou rukojetí současně do odpovídajíci
ud koule úplně nevyskočí. Dbejte na to, aby výška nastavení zůstala s

• Szerelje fel a fogantyúkat. Mindkét fogantyú szárát egyszerre csúsztassa a megfelelő csőbe, amíg a rögzítőgomb teljesen ki nem ugrik. Ügyeljen arra, hogy a két fogantyú azonos magasságban legyen.




• Szerelje fel a bottartót.

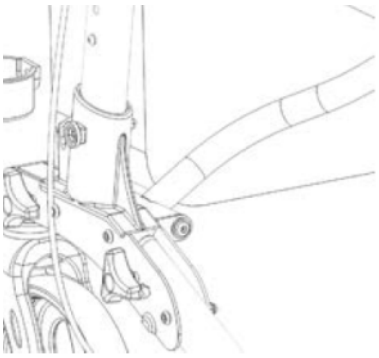



• Rögzítse a táskát.

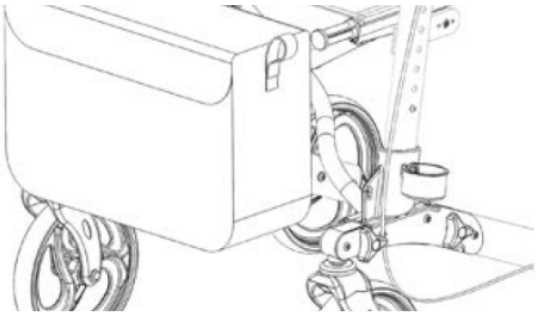

4.3 A fogantyúk magasságának beállítása

Állítsa a fogantyúk magasságát a testmagasságának megfelelően.

Az ideális beállításnál a fogantyúk egyenes testtartásban a csukló magasságában vannak.

1. Nyomja meg a rögzítőgombot.


2. Állítsa be a kívánt magasságot.

3. Hagyja a gombot a helyére bepattanni.

4. Ismételje meg a másik oldalon.

Mindkét fogantyúnak azonos magasságban kell lennie.



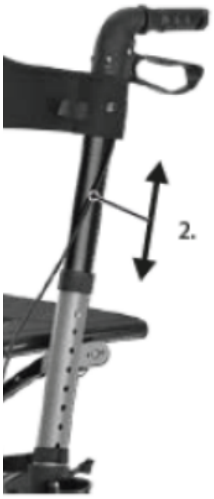

5. Szállítás

A terméket kizárólag összecsukott és rögzített állapotban szállítsa.

6. Használat

VIGYÁZAT – Nem megfelelő használat esetén fennáll az elesés veszélye.


- A terméket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
- Ne hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül.
- Lépésben haladjon.
- Ne szállítson személyeket vagy állatokat.
- Ne használja lejtőkön, lépcsőkön vagy egyenetlen terepen.
- Ne használja nedves, jeges vagy laza talajon.
- Kerülje az akadályokat.
- Tartsa be a maximális terhelhetőséget.

6.1 A járókerettel történő járás gyakorlása

- Gyakoroljon egy másik személy kíséretében.
- Tartsa a testét egyenesen.
- A rollátort vezesse a testéhez közel.
- Tegyen rövid, óvatos lépéseket.

6.2 A fékek használata

Mindkét fogantyún található fékkar.

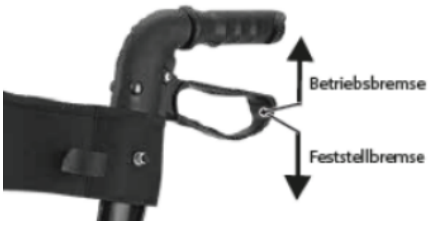

- A fékkart felfelé húzva fékezhet.
- A fékkart lefelé nyomva aktiválhatja a rögzítőféket.
- A rögzítőfék kioldásához húzza felfelé a fékkart.

A fékeket csak álló helyzetben használja.

8. Karbantartás és tisztítás

- A port nedves törlőkendővel távolítsa el.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket.
- Rendszeresen ellenőrizze a csavarokat és a csatlakozásokat.
- A sérült alkatrészeket haladéktalanul cserélje ki.

9. Javítás

Javítást kizárólag a gyártó vagy szakember végezhet.

Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

10. Szétszerelés

A szétszerelést az összeszereléssel ellentétes sorrendben végezze.

Ne használjon elektromos szerszámokat.